



Analyseur IDEXX Coag Dx™

Guide rapide de référence

Composants de l'analyseur Coag Dx™

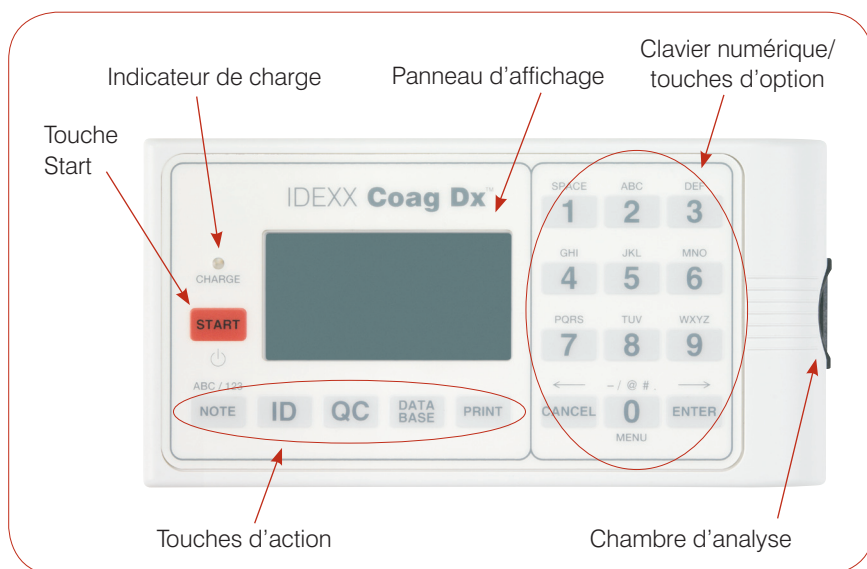

Analyseur IDEXX Coag Dx vu de dessus

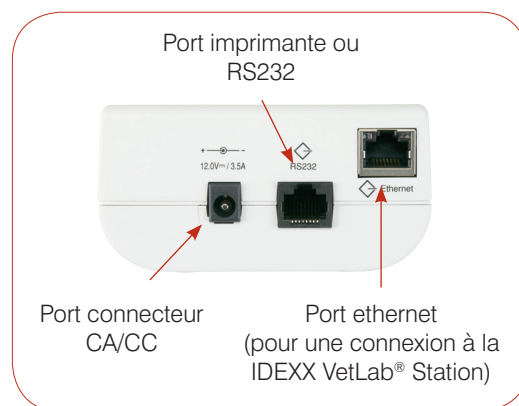

Analyseur IDEXX Coag Dx vu de côté

IMPORTANT :

Utilisez uniquement des cartouches IDEXX Coag Dx™ avec l'Analyseur IDEXX Coag Dx.

Touches Action/Option/Nombre

Touche	Description
Start	<ul style="list-style-type: none">Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'analyseur.Appuyez pour démarrer un test.
Note	Appuyez sur cette touche pour choisir entre les caractères alphabétiques (ABC) et numériques (123) en mode saisie de données.
ID	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Identify Patient (Identification du patient), dans lequel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none">Entrer un ID de client (CID).Entrer un ID de patient (PID).Sélectionner une espèce.Revenir au dernier client ou patient.
QC	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu QC Status (Statut de CQ) dans lequel vous pouvez initier un test EQC (Contrôle qualité électronique). La chambre d'analyse doit être vide pour réaliser un test EQC.
Print	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Print (Impression) dans lequel vous pouvez imprimer les résultats ou les informations relatives au système sur une imprimante externe.

Touche	Description
Data Base	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Data Base (Base de données) dans lequel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none">Visualiser le numéro d'un patient ou les résultats d'un test EQC actuellement en mémoire et disponibles.Visualiser les résultats d'un patient ou d'un EQC.Effacer les archives d'un patient ou d'un EQC.
0 – 9	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche pour sélectionner une option du menu.Appuyez pour entrer des nombres ou des lettres.Appuyez sur 0 pour afficher le Menu principal.Appuyez sur 7 pour visualiser les résultats précédents ou sur 9 pour visualiser les résultats suivants.
Cancel	<ul style="list-style-type: none">Appuyez pour stopper une opération.Appuyez pour retourner à l'écran (soit l'écran "Insert...Cartridge" (Insérer...Cartouche)).Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche en mode saisie des données.
Enter	<ul style="list-style-type: none">Appuyez pour accepter et mémoriser une entrée.Appuyez pour déplacer le curseur vers la droite en mode saisie des données.

Précautions d'utilisation

- Maintenez le module d'alimentation CA/CC branché dans l'analyseur et dans une prise d'alimentation entre deux utilisations ; et maintenez l'analyseur allumé.
- **N'ouvrez pas** l'intérieur de l'analyseur. Il ne contient aucun élément pouvant être changé par l'utilisateur. Ouvrir l'analyseur constitue une violation de la garantie et/ou le contrat de maintenance.
- **N'utilisez pas** de cartouches autres que les cartouches IDEXX Coag Dx.
- **N'utilisez pas** de cartouches au-delà de leur date d'expiration ou qui ont été mal stockées.
- **Ne forcez pas** une cartouche à l'intérieur de l'analyseur.
- **N'appuyez pas** sur les touches de l'analyseur de façon excessive.
- **N'exposez pas** l'analyseur à des températures extrêmes (au-delà de 37°C ou en-dessous de 0°C).
- **Ne faites pas** tomber l'analyseur. **N'utilisez pas** les résultats si l'analyseur est tombé durant un test.

Connexion de l'analyseur Coag Dx™ à la IDEXX VetLab® Station (version 2.30 ou ultérieure)

Connecter votre analyseur IDEXX Coag Dx à la IDEXX VetLab Station (Figure 1) vous permet d'identifier votre client et votre patient, et de transférer automatiquement les résultats des tests de coagulation dans le dossier du patient.

IMPORTANT : Lorsque l'analyseur Coag Dx est connecté à la IDEXX VetLab Station, vous ne pouvez pas lancer un test à partir de l'analyseur Coag Dx. Tous les tests doivent être lancés à partir de la IDEXX VetLab Station.

Pour connecter l'analyseur Coag Dx à la IDEXX VetLab Station :

1. Assurez-vous que l'analyseur Coag Dx et la IDEXX VetLab Station sont allumés.
2. Branchez une extrémité du câble ethernet dans le port ethernet situé sur le côté de l'analyseur Coag Dx.
3. Branchez l'autre extrémité du câble ethernet dans le routeur qui est connecté à la IDEXX VetLab Station. Utilisez le premier port LAN disponible (numérotés 1, 2, 3, etc.).

IMPORTANT : N'utilisez pas le port WAN, qui relie à l'Internet.

4. Une fois que l'icône Coag Dx apparaît sur l'écran d'accueil de la IDEXX VetLab Station, vos branchements sont terminés.

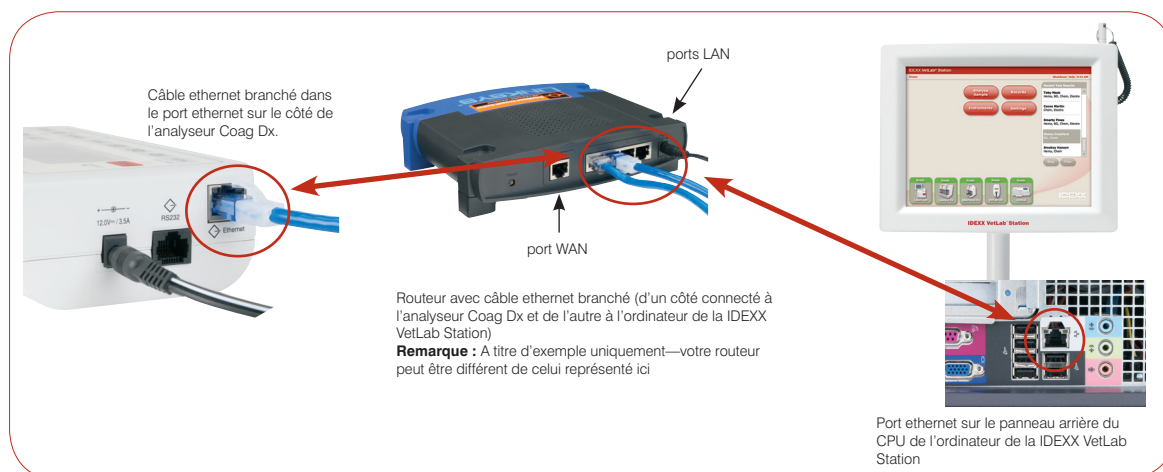


Figure 1

Assistance Technique IDEXX :

Etats-Unis/Canada/Amérique Latine 1-800-248-2483 • Europe 00800 1234 3399

Australie 1800 655 978 • Nouvelle Zélande 0800-102-084

Asie 886-2-28883336,230

IDEXX
LABORATORIES