

# Analyseur IDEXX VetLab\* UA\*

## Guide rapide de référence

### Lecture des bandelettes IDEXX UA\*


Utiliser de l'urine fraîche non centrifugée. Mélanger soigneusement l'échantillon d'urine. L'échantillon doit être à température ambiante au moment du test et ne doit pas avoir été prélevé depuis plus d'une heure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *manuel d'utilisation de l'analyseur IDEXX VetLab\* UA\**.




- 1 Utiliser une pipette pour verser l'échantillon d'urine sur la bandelette UA, en vous assurant que toutes les zones de test sont bien imprégnées. Ne pas plier la bandelette.

**IMPORTANT :** seules les bandelettes IDEXX UA peuvent être utilisées avec l'analyseur IDEXX VetLab UA. N'utilisez aucune autre marque de bandelettes.

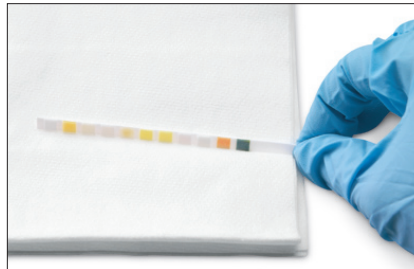

- 2 Tamponner rapidement (environ une seconde) le côté le plus long puis le dos de la bandelette de test sur un papier absorbant (par ex., une serviette en papier).

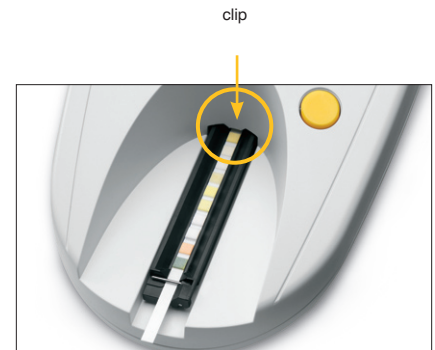

- 3 Placer la bandelette de test, avec les zones de test orientées vers vous, sur la glissière pour bandelettes de test, de telle sorte que l'extrémité distale soit couverte par le clip de la fente d'insertion. La barre de maintien doit être ouverte. Environ 2 mm de bandelette doivent être glissés sous le clip.



- 4 Appuyer sur le bouton **Start**. Un bip est émis. La glissière avance lentement et la barre de maintien se referme.

La glissière pour bandelettes tire automatiquement la bandelette de test vers l'intérieur de l'analyseur pour en permettre la lecture, puis reprend sa position initiale. Ne retirez pas la bandelette tant que l'analyseur n'est pas repassé en mode prêt à mesurer. Cela prend environ 80 secondes, depuis le moment où vous appuyez sur le bouton Start, jusqu'à la fin de toutes les mesures.



- 5 Une fois que les résultats sont imprimés, enlever et jeter la bandelette de test. À l'aide d'une serviette ne laissant pas de résidus, retirer toute trace d'urine résiduelle sur la glissière.

**REMARQUE :** si l'analyseur UA est relié à la IDEXX VetLab Station, les résultats du test sont automatiquement transmis à celle-ci.

### Support technique IDEXX

États-Unis/Canada/Amérique Latine 1-800-248-2483

Europe 00800 1234 3399

Australie 1300 44 33 99

Nouvelle-Zélande 0800-102-084

Asie 0800-291-018